ceraMotion®

One Touch One Touch No Limits One Touch Pink

Tabla de cocción general

Las temperaturas de cocción indicadas son valores aproximados. Ya que varían según el tipo de horno, puede que sea necesario modificar las indicaciones mencionadas abajo.

Para ajustar la temperatura de cocción de su horno recomendamos hacer una cocción de prueba. Únicamente así es posible determinar el proceso de cocción correcto.

	Temperatura inicial (°C)	Tiempo de secado (min)	Incremento térmico (°C/min)	Inicio del vacío (°C)	Fin del vacío (°C)	Temperatura de cocción (°C)	Tiempo de retención** (min)
Primera cocción cM pastas 2D y 3D cM Zr Paste Glaze	450	8	55	450	730	730	1 (sin vacío)
Segunda cocción Corrección cM pastas 2D y 3D cM Zr Paste Glaze	450	8	55	450	720	720	1 (sin vacío)

* En restauraciones grandes es posible mejorar la calidad de cocción a través de reducir el incremento térmico.

** Alargar el tiempo de retención en casos de restauraciones grandes para compensar la conductividad térmica del ZrO2.

Resumen de pastas ceraMotion® One Touch.

Todas las pastas ceraMotion® One Touch 2D y 3D, los líquidos y los ceraMotion® Stains Universal pueden mezclarse.

	Paste 2D body A	Paste 2D body B	Paste 2D body C	Paste 2D body D	Paste 2D white	Paste 2D grey	Paste 2D honey	Paste 2D blue	Paste 2D violet	Paste 2D Incisal I2	Paste 2D Incisal I3	Paste 2D Body R	Paste 2D Body L	Paste 2D Body R+	Paste 2D Body orange	Paste 3D I2	Paste 3D lumin	Paste 3D neutral	Paste 3D opal blue	Paste 3D opal grey	Paste 3D opal honey	Paste 3D Dentin bleach	Paste 3D Dentin light	Paste 3D Dentin medium	Paste 3D Dentin dark	Paste 3D transpa	Paste 3D Incisal opal bright	Paste 3D I3	Paste 3D Gingival 1	Paste 3D Gingival 2	Paste 3D Gingival 3	Paste 3D Gingival 4	Paste 3D Gingival white	Paste 3D Gingival transpa	Paste 3D Gingival Modifier
ceraMotion® One Touch	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓														
ceraMotion® One Touch No Limits										✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
ceraMotion® One Touch Pink																													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ceraMotion®

ceramotion.urudent.uy

UruDent.UY

Representante Exclusivo

DENTAURUM

Ejido 1415 / 405 esq. Colonia 2900 4801 / 2901 3824 099 115 600 info@urudent.com.uy urudent.uy urudent_uy



ceraMotion® Zr Paste Glaze

Masa de glaseado fluorescente lista para su uso inmediato.

Ofrece una mojabilidad segura de la superficie del material haciendo posible una aplicación controlada y precisa.

Solo es necesaria una cocción de brillo (brillo homogéneo después de la primera cocción de brillo).





ceraMotion® One Touch Diluting Liquid

El Diluting Liquid se utiliza para diluir pastas (Zr Paste Glaze, 2D y 3D).
Hace posible una aplicación aun más fina de las pastas 2D con un efecto de barniz.

El Diluting Liquid está diseñado sobre todo para el uso con pastas 2D y para la aplicación de capas muy finas del Zr Paste Glaze.




ceraMotion® One Touch Refreshing Liquid

El Refreshing Liquid se utiliza sobre todo para las pastas 3D, ya que mantiene la capacidad de modelación de las pastas.

Si la pasta 3D es demasiado seca, utilice el Refreshing Liquid.


Con el Refreshing Liquid se puede regular la viscosidad de pastas 3D sin modificar el comportamiento tixotrópico.

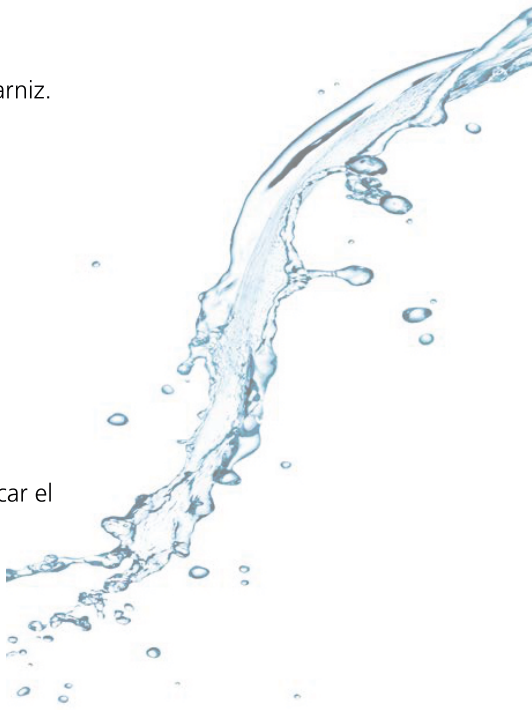


Esquema básico de pastas 2D y 3D.

Las pastas 2D se aplican sobre todo en la región de dentina y las pastas 3D sobre todo en la región incisal.
Puede aplicar todas las pastas 2D y 3D de forma individual.



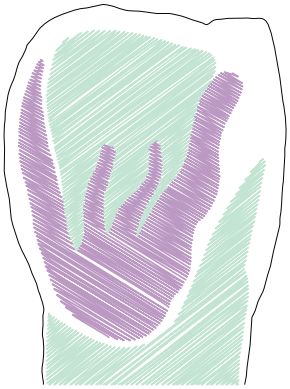

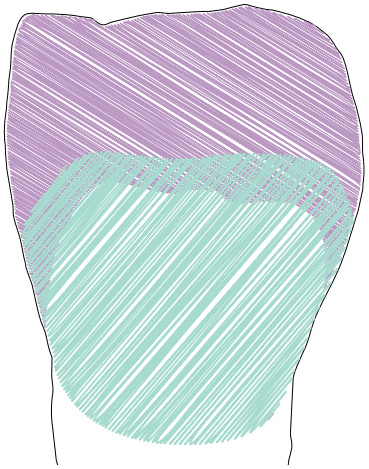

ceraMotion®
ceramotion.urudent.uy

UruDent.UY
Representante Exclusivo
DENTAURUM

Ejido 1415 / 405 esq. Colonia 2900 4801 / 2901 3824 099 115 600 info@urudent.com.uy urudent.uy urudent_uy