Tabla de Cocciones ceramotion® zr

Zirconio	Temperatura inicial (°C)	Tiempo de secado (min)	Incremento térmico (°C/min)*	Inicio del vacío (°C)	Fin del vacío (°C)	Temperatura de cocción (°C)	Tiempo de retención (min)**
Cocción Connecting Liner 1 + 2	500	4	55	500	810	810	2 (con vacío)
Cocción Connecting Dentina básica/dentina	500	6	55	500	780	780	2 (con vacío)
Cocción hombros 1 + 2	500	6	55	500	780	780	2 (con vacío)
Cocción dentina 1	500	6	55	500	750	750	2 (con vacío)
Cocción dentina 2	500	4	55	500	750	750	2 (con vacío)
Masa de corrección****	500	4	55	500	715	715	1 (con vacío)
Cocción de brillo	500	4	55	***	***	750	1
Cocción brillo con glaseado	500	6	55	500	750	750	1
Touch Up brillo y corrección	500	6	55	500	730	730	1

* en trabajos grandes puede mejorarse la calidad de la cocción reduciendo el incremento térmico

** en trabajos grandes prolongar el tiempo de espera o de retención para compensar la mala conductibilidad térmica del ZrO_2

Masa de Hombros

Color del diente	A	B	C	D	Blanca
A1	50 %				50 %
A2	65 %				35 %
A3	70 %				30 %
A3,5	100 %				
A4	100 %				
B1		35 %			65 %
B2		80 %			20 %
B3		90 %			10 %
B4		100 %			
C1			50 %		50 %
C2			75 %		25 %
C3			85 %		15 %
C4			100 %		
D2				60 %	40 %
D3	60 %			30 %	10 %
D4				100 %	

Esquema de Capas

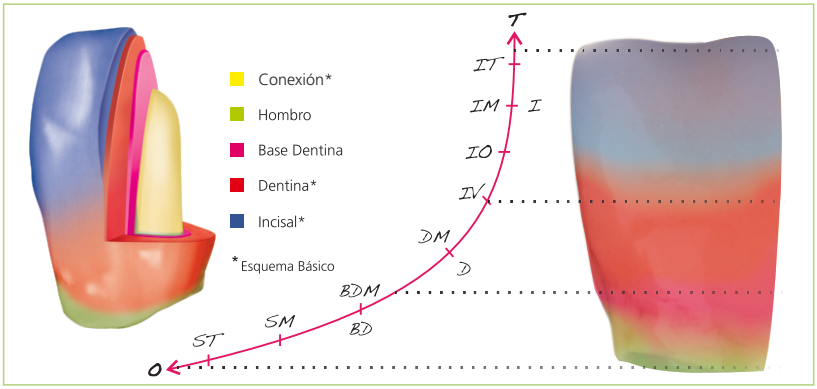


Tabla de clasificación de incisal

Color de la dentina	Incisal Standard	Incisal Opal	Incisal Transpa
A1, A2, B1	I 1	IO 1	IT 1
A3, A3,5, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, D4	I 2	IO 2	IT 2
A4, C4	I 3	IO 3	IT 3

Disilicato de litio	Temperatura inicial (°C)	Tiempo de secado (min)	Incremento térmico (°C/min)*	Inicio del vacío (°C)	Fin del vacío (°C)	Temperatura de cocción (°C)	Tiempo de retención (min)
Dentina Básica Cocción Connecting	500	6	55	500	760	760	1 (con vacío)
Cocción dentina	500	6	55	500	760	760	1 (con vacío)
Cocción de brillo**	500	4	55			750	1

ceramotion®

ceramotion.urudent.uy

UruDent.UY

Representante Exclusivo

DENTAURUM

Ejido 1415 / 405 esq. Colonia 2900 4801 / 2901 3824 099 115 600 info@urudent.com.uy urudent.uy urudent_uy

Tabla de mezcla de Connecting Liner

Color del diente	L1	L2	L3	L4	L5	L6
A1	1/3				2/3	
A2	2/3				1/3	
A3	1					
A3,5	3/4					1/4
A4	1/2					1/2
B1		1/3			2/3	
B2		2/3			1/3	
B3		3/4			1/4	
B4		1				
C1			1/3		2/3	
C2			2/3		1/3	
C3			3/4		1/4	
C4			1			
D2				2/3	1/3	
D3				3/4	1/4	
D4		1/3		2/3		

Vista de conjunto de productos

Liner	L	1-6
Liner Modifier	LM	gingival, orange
Shoulder	SM	A, B, C, D, white, transpa
Gingival	G	1, 2, 3, 4
Base Dentin	BD	A-D
Base Dentin Modifier	BDM	salmon, caramel, ochre, ivory, lemon, vanilla, brown
Dentin	D	A-D
Dentin Modifier Chroma	DM C	A, B, C, orange
Dentin Modifier Fluo	DM F	cream, yellow, orange
Incisal	I	1, 2, 3
Incisal Opal	IO	1, 2, 3
Incisal Transpa	IT	1, 2, 3
Transpa	T	transpa
Incisal Modifier	IM	opal honey, opal white, opal blue, grey, opal grey
Chroma Concept Liner	CC L	1 (bleach), 2, 3, 4
Chroma Concept Dentin	CC D	1 (bleach), 2 (bleach), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Chroma Concept Incisal	CC I	1 (bleach)
Touch Up Base Dentin	TU BD	light, medium, dark
Touch Up Dentin	TU D	light, medium, dark
Touch Up Incisal	TU I	medium, opal, transpa
Correction	C	transpa
Glaze	GL	transpa
Body Stains	B ST	A, B, C
Stains	ST	1 white, 2 vanilla, 3 yellow, 4 orange, 5 pink, 6 purple, 7 blue, 8 grey, 9 olive green, 10 olive yellow, 11 medium brown, 12 red brown, 13 black
Liquids		Modelling Liquid, Modelling Liquid +, Powder BOL Liquid, Shoulder Liquid, Stains Liquid, Contrast Marker

Chroma Concept

Tabla de clasificación de colores para reproducir colores de VITA System 3D Master

Color VITA System 3D-Master	Tabla de mezcla de dentina ceraMotion® Zr				Liner	Masa incisal
OM1	100%	CC D 1			CCL1 bleach	CCI1 bleach
OM2	50%	CC D 1	+ CC D 2	50%	CCL1 bleach	CCI1 bleach
OM3	100%	CC D 2			CCL1 bleach	CCI1 bleach
1M1	50%	D A1	+ CC D 2	50%	**L2** 1/3 **L5** 2/3	I1
1M2	60%	CC D 1	+ CC D 5	40%	**L2** 2/3 **L5** 1/3	I1
2M1	75%	CC D 3	+ CC D 1	25%	**L2** 2/3 **L5** 1/3	I2
2L1.5	67%	D A2	+ D B1	33%	**L2** 2/3 **L5** 1/3	I2
2R1.5	50%	CC D 2	+ CC D 6	50%	**L4** 2/3 **L5** 1/3	I2
2M2	90%	D A2	+ D B3	10%	**L2** 2/3 **L5** 1/3	I2
2L2.5	80%	D B3	+ CC D 1	20%	**L2** 2/3 **L5** 1/3	I2
2R2.5	55%	CC D 2	+ CC D 9	45%	**L2** 2/3 **L5** 1/3	I2
2M3	75%	CC D 5	+ CC D 2	25%	**L2** 2/3 **L5** 1/3	I2
3M1	90%	CC D 3	+ CC D 4	10%	CCL 2	I3
3L1.5	50%	CC D 3	+ CC D 4	50%	CCL 2	I3
3R1.5	50%	CC D 3	+ CC D 6	50%	CCL 2	I3
3M2	50%	CC D 3	+ CC D 5	50%	CCL 2	I3

Color VITA System 3D-Master	Tabla de mezcla de dentina ceraMotion® Zr				Liner	Masa incisal
3L2.5	50%	CC D 4	+ CC D 5	50%	CCL 2	I3
3R2.5	50%	CC D 5	+ CC D 6	50%	CCL 2	I3
3M3	90%	CC D 5	+ CC D 3	10%	CCL 2	I3
4M1	50%	CC D 7	+ CC D 10	50%	CCL 3	I3
4L1.5	75%	CC D 7	+ CC D 9	25%	CCL 3	I3
4R1.5	75%	CC D 10	+ CC D 8	25%	CCL 3	I3
4M2	50%	CC D 7	+ CC D 9	50%	CCL 3	I3
4L2.5	75%	CC D 8	+ CC D 10	25%	CCL 3	I3
4R2.5	75%	CC D 8	+ CC D 7	25%	CCL 3	I3
4M3	50%	CC D 9	+ CC D 9	50%	CCL 3	I3
5M1	50%	CC D 10	+ CC D 11	50%	CCL 4	I3
5M2	50%	CC D 10	+ CC D 12	50%	CCL 4	I3
5M3	50%	CC D 9	+ CC D 12	50%	CCL 4	I3

ceraMotion®

ceramotion.urudent.uy

UruDent.UY

Representante Exclusivo

DENTAURUM

Ejido 1415 / 405 esq. Colonia 2900 4801 / 2901 3824 099 115 600 info@urudent.com.uy urudent.uy urudent_uy